

eagle.IOS

DABI ATLANTE

EL PRIMER ESCÁNER INTRAORAL FABRICADO EN BRASIL

El EAGLE IOS es producido en Brasil y distribuido en toda Latinoamérica por Dabi Atlante. La tecnología utilizada en Eagle IOS fue desarrollada por un equipo franco-estadounidense y está presente

en los principales mercados del mundo.

Toda esta tecnología está ahora a su alcance, con el compromiso y los servicios de Dabi Atlante.



**NO
NECESITA
RECALIBRACIÓN**


ROTACIÓN EN
360°

59
SEGUNDOS PARA
UN ESCANEO
DE ARCADA COMPLETA

150g
COMPACTO
Y LIGERO

PUNTAS
ESTERILIZABLES
EN
AUTOCLAVE **250**
VECES

SISTEMA
ANTIEMPAÑANTE
POR AIRE

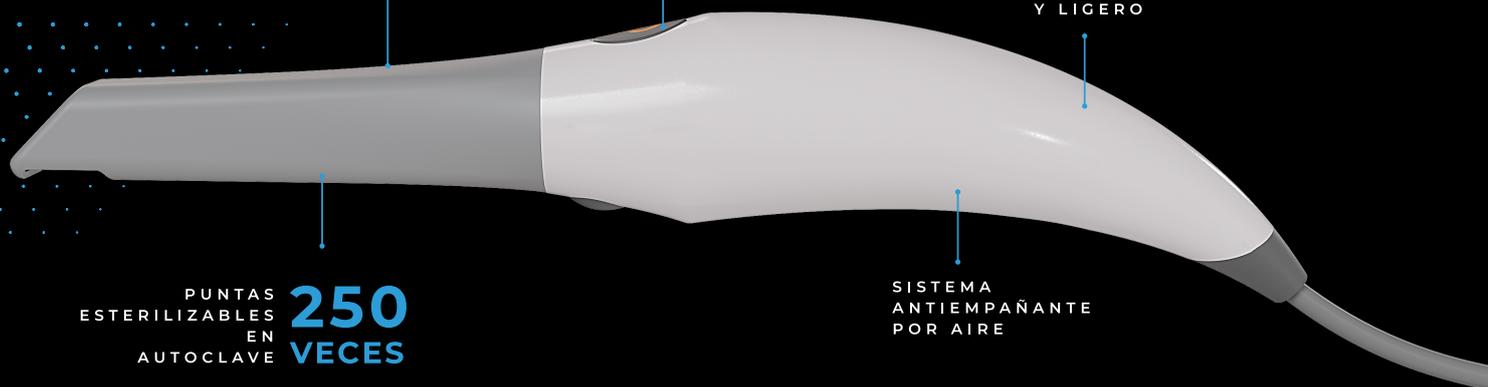



ESCÁNER DE ALTA TECNOLOGÍA Y ERGONÓMICO

Eagle IOS es un escáner intraoral portátil, ergonómico y ligero, siendo uno de los más ligeros del mercado. Ofrece una interfaz amigable, simplificando su uso y agregando productividad a tu trabajo. Con él es posible realizar escaneos precisos y ágiles para la producción de modelos de estudio, alineadores de ortodoncia, prótesis, placa miorrelajante, entre otros.

El EAGLE IOS no necesita una recalibración diaria o semanal para comenzar a usarlo. Su software es libre de licencia anual, se puede instalar en más de una computadora y las actualizaciones son automáticas.

Tiene una función que informa la calidad del escaneo, lo que evita el retrabajo y estimula una buena productividad. Y con un solo clic, el resultado se puede enviar al laboratorio de su elección.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
TIPO DE ESCÁNER	Escáner portátil de mano que crea impresiones ópticas para restauraciones dentales
DIMENSIONES BÁSICAS	C x L x A: 306 mm x 98 mm x 72 mm
DIMENSIONES DE ESCÁNER	C x L x A: 256 mm x 43 mm x 43 mm
PESO	150 g
LONGITUD DEL CABLE	2 m
PUNTA DEL ESCÁNER	Reutilizable hasta 250 veces, esterilizable en autoclave (siga las instrucciones del manual del usuario)
ELEMENTO DE CALEFACCIÓN	Ventilador, evitando el empañamiento de la lente
TECNOLOGÍA DE SENSORES	CMOS
COLOR	SI, 24 bits (8 bits por canal)
FRECUENCIA DE ESCANEO	25 - 30 FPS (CUADROS POR SEGUNDO)
CAMPO DE VISIÓN	12 mm x 14 mm
LUZ	LED - ALTA POTENCIA
ENTRADA ELÉCTRICA	5V DC, 100-240V AC, 50-60Hz

PROCESO DE ESCANEO	
PREPARACIÓN DENTAL	No es necesario usar spray o polvo
PRINCIPIO DE ESCANEO	Escaneo continuo y acumulativo con datos de profundidad y color
DISTANCIA LECTOR-DIENTES	0 - 16 mm
INTERFAZ DE COMPUTADORA - ESCÁNER	Cable USB 3.0

SOFTWARE	
LICENCIA DE SOFTWARE EAGLE IOS	Gratis con el sistema Eagle IOS Scanner, sin cuota anual
FORMATO DE ARCHIVOS GENERADO	STL, PLY, OBJ
COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS CAD/CAM	STL, PLY, OBJ ABIERTO (ARQUITECTURA ABIERTA) COMPATIBLE CON LA MAYORÍA DE LOS SISTEMAS CAD

CONFIGURACION DE COMPUTADORA	
PROCESADOR	Intel i7 - 4 Colores o superior
CLOCK CPU	2.8 GHZ o superior
MEMORIA	16 GB o superior (DDR4 o superior)
GPU	Procesador de gráficos NVIDIA GeForce 10 Series (GTX): 1070 o superior con al menos 6 GB de memoria de video Serie RTX2000: 2060 o superior con al menos 6 GB de memoria de video
SSD	512 GB o superior
Puerta USB	Al menos 1 puerta USB 3.0
SISTEMA OPERATIVO	Windows 10 Professional o superior

51000000280 - JAN 23
ANVISA 10101130093



dabiatlante.es



dabiatlante_oficial



dabiatlante



dabiatlante_oficial

DABIATLANTE

PEDIR PRESUPUESTO

