
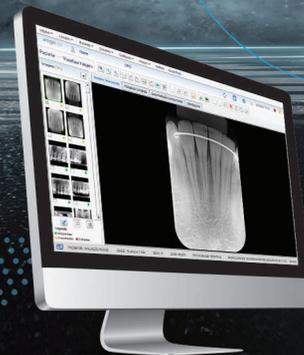


-eagle.ps

DABI ATLANTE

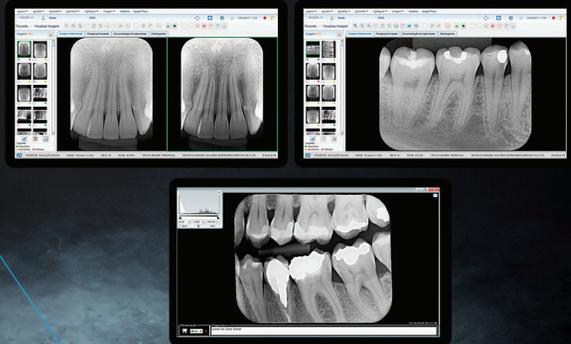

PLACAS INTRAORALES DE FÓSFORO EN LOS TAMAÑOS 0, 1, 2 Y 3.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Placas intraorales de fósforo en los tamaños 0, 1, 2 y 3;
- Software completo con herramientas de edición como: rotación, zoom, ajuste de brillo, contraste y gamma, inversión del color, inserción de texto, flechas, círculos, medición de ángulos y segmentos, barra para informes/diagnósticos, odontograma y comparación de imágenes a pantalla completa;
- Registre a sus pacientes, capture imágenes al instante, informe y organice todas las radiografías en segundos;
- Permite el uso compartido del software en red, siendo una solución muy rentable y práctica para los consultorios con varias salas y redes de clínicas. Para un mayor control, es posible configurar varios usuarios y establecer los permisos para cada uno de ellos;
- Exportar a varios formatos, incluido DICOM;
- Es compatible con Radio Memory Studio 2 y Studio 3;
- Tiene un controlador TWAIN para la compatibilidad con otro software;
- Facilidad para enviar imágenes por correo electrónico;
- Portable, plug and play con software de fácil instalación;
- Viene con cuatro placas de fósforo intraorales, tres de tamaño 2 y una de tamaño 0;
- Incluye un limpiador (Asepsi) indicado para la higienización de placas de fósforo radiográficas.



Las placas de fósforo intraorales son 30 veces más finas que los sensores tradicionales con cable utilizados en la obtención de imágenes digitales, y proporcionan el 100% del área activa sin perder estructuras importantes.



REQUISITOS DEL SISTEMA:

Sistema operativo: Windows 7 (32 y 64 bits) o superior o Mac OS X v10.8 a v10.9 / Procesador: Intel i5 3.0 GHz o superior / RAM: 8 Gb/HD: 10 Gb de espacio mínimo / Entrada: 1 puerto USB 2.0. Los requisitos anteriores son necesarios para garantizar la máxima calidad de imagen del software. Si no se cumplen, la calidad de la imagen puede verse comprometida. Siempre que el monitor utilizado tenga una resolución inferior al tamaño de la imagen mostrada, la calidad de la imagen puede verse comprometida.

Fotos ilustrativas. Dabi Atlante se reserva el derecho de hacer cambios en el diseño y las especificaciones técnicas de los productos sujetos a la autorización de ANVISA con el fin de perseguir su mejora. Anvisa: 1010139027. 51000000148 - Versión Jun/2021.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante

DABI ATLANTE