

CHEGOU O

eagle.S

DABI ATLANTE

MAIS CONFORTO PARA O SEU PACIENTE

Tecnologia de ponta em imagem e conforto para seu paciente para levar seu consultório para o mundo digital

+
AGORA MAIS FINO
CONFORTO PARA O PACIENTE, PRATICIDADE PARA VOCÊ!

5mm DE ESPESURA

A EVOLUÇÃO DA SUA IMAGEM




O Eagle.S fornece imagens em alta definição para um diagnóstico mais preciso e, portanto, mais seguro.

Conecta você ao futuro, otimiza o seu fluxo de trabalho com radiografia intraoral e gerencia as imagens dos seus pacientes de forma eficiente.

Economize tempo, dinheiro, impressione seus pacientes e ajude o meio ambiente!

O Eagle.S é compatível com equipamentos de Raios-X disponíveis no mercado e o software é super fácil de usar.

É hora de deixar o analógico para trás e digitalizar a sua clínica.

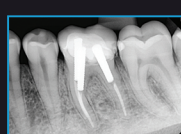

BENEFÍCIOS DO EAGLE.S



- FACILITA O ACESSO ENTRE OS PROFISSIONAIS
- EDITE, MANIPULE E SALVE AS IMAGENS
- ECOLOGICAMENTE CORRETO
- PRECISÃO NOS DIAGNÓSTICOS
- REDUZ O CUSTO COM FILMES E PROCESSAMENTO
- OTIMIZA O TEMPO E O ATENDIMENTO
- IMPRESSIONA OS CLIENTES

Tamanho 2:
área ativa: 26x36mm

Tamanho 1:
área ativa: 20x30mm

CARACTERÍSTICAS

COMPATIBILIDADE

O Eagle.S é compatível com a maioria dos equipamentos de Raios-X Intraoral existentes no mercado.

LICENÇAS ILIMITADAS

O software que acompanha o Eagle.S vem sem limites de licenças e você pode instalá-lo em vários computadores*. Salve as imagens em uma pasta na rede e acesse de qualquer lugar.

COMPARTILHE IMAGENS E DIAGNÓSTICO

Salve imagens em diversos formatos como TIFF, BITMAP, PNG, DICOM, JPGE. Gere laudos em PDF e em instantes compartilhe por email com seus clientes e/ou colegas que vão dar sequência ao tratamento.

ECONOMIZE TEMPO

Enquanto você leva cerca de cinco minutos para capturar e revelar uma imagem através do sistema analógico, com o Eagle S você leva cerca de 5 segundos.

ECONOMIZE DINHEIRO

Pare de gastar com filmes e produtos químicos. Eagle.S é a versão mais rentável.

IMAGENS MAIS NÍTIDAS

Capture imagens de alta definição em tempo real. Com 25 pares de linha (teórico) e avançados recursos de processamento de imagem, você tem a disposição imagens nítidas para o melhor diagnóstico.

TECNOLOGIA Csi-TL

O Eagle.S possui em seu centilador a tecnologia presente nos tomógrafos de alta definição, o Iodeto de Césio (Csi-TL) para imagens com alto poder de diagnóstico.

IMAGENS ORGANIZADAS

Cadastre seus pacientes, capture imagens, laude e organize todas as imagens em segundos. Com o Eagle S você pode encontrar, acessar e compartilhar as imagens com total agilidade.

FÁCIL REPOSIÇÃO DO CABO

O Eagle.S utiliza cabo USB 2.0 de fácil reposição (3 metros de comprimento)*

IMPRESSIONE SEUS CLIENTES

O Eagle.S traz o seu consultório para o futuro. Seus clientes ficarão impressionados com sua tecnologia. Demonstre com riqueza de detalhes o tratamento a ser feito e no final, compare as imagens anteriores e posteriores ao procedimento.

COMPLETO EM RECURSOS

O Eagle.S oferece de maneira amigável uma ampla gama de ferramentas como: rotação, zoom, ajuste de brilho, contraste e gama, positivo/negativo, ajuste de cor, alto-relevo, inserção de texto, setas, círculos, seleção e recorte de áreas, medição de ângulos e segmentos, barra para laudos/diagnóstico, odontograma e comparação de imagens em tela cheia.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

*Sistema operacional: Windows 7 Home, Start, Pro (x86 andx64); Windows 8 Pro (x86 andx64); Windows 8.1 Pro (x86 andx64); Windows 10 Home e Pro (x86 andx64) e CPU: Intel Core i3 3.0 GHz ou maior. RAM: 4GB DDR2 SDRAM - HDD: 500 GB ou maior - PCI; NCI; Vídeo; USB Connector: 2X USB 2.0- Monitor: 1024 x 768; Fonte de energia.

SOLICITE ORÇAMENTO



Fotos Ilustrativas. A Dabi Atlante reserva-se ao direito de realizar alterações no design e especificações técnicas dos produtos mediante autorização da ANVISA para prosseguir no aperfeiçoamento do mesmo. Digital Sensor: Anvisa 10101139029. 51000000257: Versão - Jan/2023. * variação de + ou - 0,5m.



dabiatlante



dabiatlante_oficial



dabiatlante



dabiatlante_oficial

DABI ATLANTE