

Conozca la Línea de CONSULTORIOS 2024

LÍNEA PRESTIGE

BRAZO DE APOYO PLEGABLE

PEDAL JOYSTICK MULTIFUNCIONAL

SISTEMA FLUSH

UNIDAD DE AGUA CON SENSOR DE PROXIMIDAD Y PORTA VASOS

REFLECTOR 5 LEDS CON SENSOR DE PROXIMIDAD

SISTEMA ANTIPINZAMIENTO

HASTES RETRÁCTILES CON SISTEMA DE BLOQUEO (PRESTIGE 1H Y PRESTIGE 3H)



SILLÓN

- Sistema antipinzamiento.
- Brazo de apoyo plegable para el paciente.
- Reposacabezas anatómico y biarticulado.
- Pedal joystick con posición de retorno a cero; 3 posiciones de trabajo; posición de escupir y encendido del reflector.
- Posición de Trendelenburg.

UNIDAD DENTAL

- Brazo con bloqueo neumático
- Hasta 5 terminales, según la versión.
- Bandeja doble (prestige 3)
- Control PAD con negatoscopio: activando todos los comandos del sillón, unidad de agua, unidad dental y reflector.

UNIDAD DE AGUA

- Brazo asistente con PAD
- Fácil acceso a los filtros de residuos.
- Unidad de agua abatible en 60°.
- Accionamiento eléctrico del agua de la cubeta y del porta vasos.
- Terminal Sugador BV y Vac Plus.
- Sensor de Proximidad.
- Porta vasos.

REFLECTOR 5 LEDS

- Menor consumo de energía y mayor durabilidad.
- Sensor de proximidad.
- Selección de la intensidad luminosa, de 25,000, 35,000 y 45,000 LUX.
- Asas laterales removibles.
- Protector Frontal: Removible.

ÍTEMS DE SERIE

Reflector Sirius 5 LEDs

- Tecnología de iluminación LED: Eficiente en términos energéticos y duradero.
- Sensor de proximidad para activación y control de intensidad de luz.
- Fuente de luz fría, sin generación de calor.
- Foco rectangular para una mayor área de trabajo.
- Diseño innovador con manejo ergonómico.
- Asas laterales autoclavables.
- Protector frontal removible para protección del sistema óptico.
- Sistema óptico con 5 LEDs con sensor
- Tres intensidades: 25,000, 35,000 y 45,000 LUX



Brazo asistente con PAD



Control PAD con negatoscopio

- Subida y bajada del asiento del sillón
- Subida y bajada del respaldo del sillón
- Bloqueo de movimientos
- Posición de retorno a cero
- Accionamiento del agua de la cubeta y del porta vasos
- Posición de escupir y retorno a la última posición
- Programación de trabajo
- Encendido del reflector


Micromotor Eléctrico

- Transmisión de Velocidad: 1:1
- Velocidad Máxima: 40,000 rpm
- Torque Máximo: 3.5 N.cm
- Sistema de Irrigación Interno
- Sistema de Iluminación LED+
- Tipo de Conexión: ISO 3964 Acoplamiento Corto (INTRA)
- Peso: 57 gramos

(solo en las versiones Prestige 3 y Prestige 3H)



COMPARE LAS VERSIONES

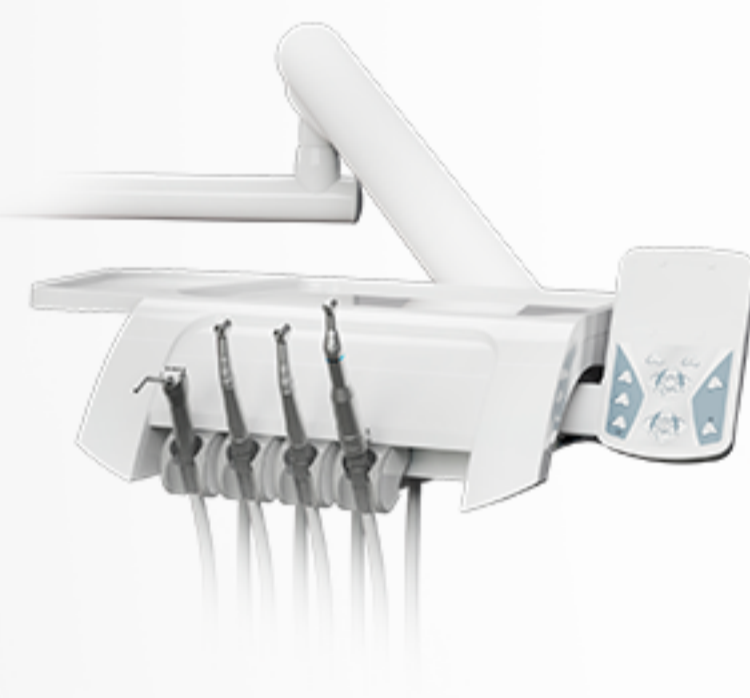


	PRESTIGE 1	PRESTIGE 1H	PRESTIGE 3	PRESTIGE 3H
Sillón	Reposacabezas neumático Brazo de apoyo plegable Sistema de masaje Column Lift Soporte para piernas plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable	Reposacabezas biarticulado Brazo de apoyo plegable
Unidad Dental	Air	Hasteflex	Air	Hasteflex
Accesorios de la Unidad Dental	Tapa de acero inoxidable Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Doble Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro	Bandeja Inferior Control PAD Negatoscopio Sistema Flush Manómetro
Terminales de la Unidad Dental	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 2 Terminales para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Micromotor Eléctrico	Jeringa Triple 1 Terminal para Alta Rotación 1 Terminal para Baja Rotación Ultrasonido Chorro de Bicarbonato Micromotor Eléctrico
Accesorios de la Unidad de Agua	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra	Escupidera extraíble de porcelana Brazo asistente con PAD Porta Vasos Sensor de Proximidad Válvula Selectora Válvula Maestra
Terminales de la Unidad de Agua	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple	Aspirador Vac Plus Aspirador Bomba de Vacío Jeringa Triple
Reflector	Sirius 5 LEDs	Sirius 5 LEDs	Sirius 5 LEDs	Sirius 5 LEDs

COLORES DABI

Tapizados que inspiran su rutina de trabajo.

PVC o Viscoelástico

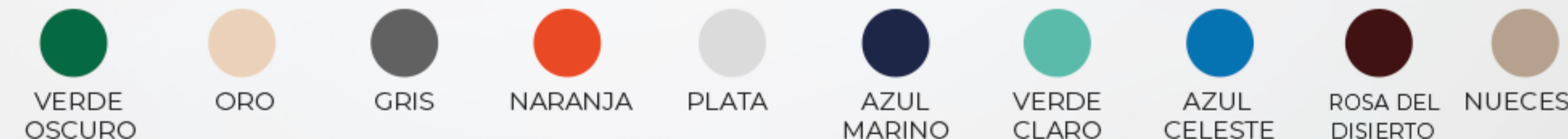

Cuero



SOLICITE PRESUPUESTO



Fotos ilustrativas. Los colores pueden haber sufrido alteraciones en la reproducción gráfica. Dabi Atlante se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño y especificaciones técnicas de los productos, previa autorización de la ANVISA, para continuar con su perfeccionamiento. Los consultorios dentales Prestige 1, Prestige 1H, Prestige 3 y Prestige 3H están compuestos por: Sillón New Croma - Anvisa: 10069210062 | Unidad Dental Syncrus G3; Syncrus G3 H; Syncrus G8 FE; Syncrus G8 HE - Anvisa: 10069210075 | Unidad de agua Syncrus G3 - Anvisa: 10069210063 | Reflector Sirius G8 Sensor 5 Leds - Anvisa: 10069210069

51000000172: Versión - Abr/2024.

